

Návod k použití

Vložky silikonové (CS)

Návod na použitie

Vložky silikonové (SK)

Popis výrobku:

Měkké silikonové vložky jsou určeny pro použití s 24mm prsními nástavci Medela a zajišťují přesné nastavení velikosti. Kompatibilní s těmito prsními nástavci Medela: Motion InBra™, Hands-free, PersonalFit Flex™, PersonalFit™ PLUS, pro použití s následujícími odsávacími mateřského mléka: Harmony™, Motion InBra™, Swing Maxi™, Solo™, Freestyle™, Pump In Style.

Určený účel používání:

Vložky jsou navrženy pro použití s kompatibilními odsávacími mateřského mléka Medela a slouží ke zmenšení velikosti 24mm prsních nástavců, čímž zajišťují lepší přizpůsobení a větší pohodlí při odsávání.

Velikosti, které jsou součástí balení: 2 × 21 mm, 2 × 18 mm, 2 × 15 mm

Návod k použití:

Vyberte správnou velikost vložky podle průměru své bradavky (viz obr. 1).

Před prvním použitím vložky omyjte. Umístěte vložku do prsního nástavce tak, aby těsně a pevně dosedla (viz obr. 2). Používejte sestavený prsní nástavec s kompatibilní odsávací součástí mateřského mléka Medela v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití odsávací. Před čištěním vyjměte vložku z nástavce (viz obr. 3).

Pokyny pro čištění:

Vložky omyjte a dezinfikujte stejným způsobem, jaký je doporučen pro prsní nástavec. Podrobný postup čištění naleznete v návodu k použití, který je součástí vaší kompatibilní odsávací součásti mateřského mléka Medela.

Varování:

- Nepoužívejte vložku, pokud je poškozená nebo pokud jste alergická na silikon.
- Prestaňte vložku používat, pokud podráždění přetrvává.
- Nepoužívejte s prsními nástavci jiných značek ani s nekompatibilními odsávacími součástmi.

Další informace:

Vyměňte po 3 měsících používání. Další informace naleznete v návodu k použití kompatibilních odsávacích součástí mateřského mléka Medela.

Materiál: silikon.

Likvidace: prostřednictvím místních systémů recyklace pro silikonové díly, jsou-li k dispozici.

Popis výrobku:

Mäkké silikonové vložky sú určené na použitie s 24mm prsnými nástavcami Medela a zaisťujú presné nastavenie veľkosti. Kompatibilné s týmito prsnými nástavcami Medela: Motion InBra™, Hands-free, PersonalFit Flex™, PersonalFit™ PLUS, pre použitie s nasledujúcimi odsávacími materského mlieka: Harmony™, Motion InBra™, Swing Maxi™, Solo™, Freestyle™, Pump In Style.

Určený účel používania:

Vložky sú navrhnuté pre použitie s kompatibilnými odsávacími materského mlieka Medela a slúžia k zmenšeniu veľkosti 24mm prsných nástavcov, čím zaisťujú lepšie prispôsobenie a väčšie pohodlie pri odsávaní.

Veľkosti, ktoré sú súčasťou balenia: 2 × 21 mm, 2 × 18 mm, 2 × 15 mm

Návod na použitie:

Vyberte správnu veľkosť vložky podľa priemeru svojej bradavky (viď obr. 1).

Pred prvým použitím vložky umyte. Umiestnite vložku do prsného nástavca tak, aby tesne a pevne dosadla (viď obr. 2). Používajte zostavený prsný nástavec s kompatibilnou odsávacou materského mlieka Medela v súlade s pokynmi uvedenými v návode na použitie odsávací. Pred čistením vyberte vložku z nástavca (viď obr. 3).

Pokyny na čistenie:

Vložky umyte a dezinfikujte rovnakým spôsobom, aký je odporúčaný pre prsné nástavce. Podrobný postup čistenia nájdete v návode na použitie, ktorý je súčasťou vašej kompatibilnej odsávací součásti materského mlieka Medela.

Varovanie:

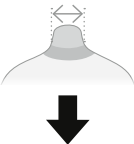
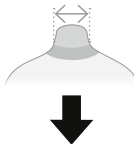
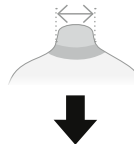
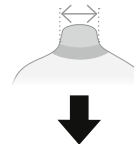
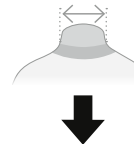
- Nepoužívajte vložku, ak je poškodená alebo ak ste alergická na silikon.
- Prestaňte vložku používať, ak podráždenie pretrváva.
- Nepoužívajte s prsnými nástavcami iných značiek ani s nekompatibilnými odsávacími součástmi.

Dalšie informácie:


Vymeňte po 3 mesiacoch používania. Další informace nájdete v návode na použitie kompatibilných odsávacích součástí materského mlieka Medela.

Materiál: silikon.


Likvidácia: prostredníctvom miestnych systémov recyklácie pre silikonové diely, ak sú k dispozícii.

11 mm or smaller	12 mm, 13 mm or 14 mm	15 mm, 16 mm or 17 mm	18 mm, 19 mm or 20 mm	21 mm or bigger
				
15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	27 mm
				

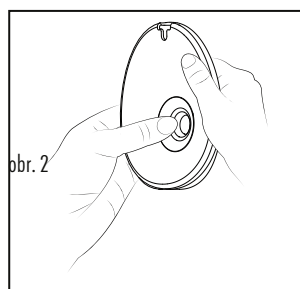obr. 1



obr. 2

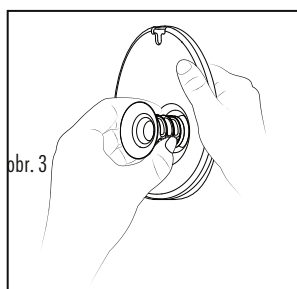

obr. 3



Medela LLC
1101 Corporate Drive
McHenry, IL 60050, USA
www.medela.com

UK Responsible Person:
Medela UK Ltd
Unit 3 Huntsman Drive
Northbank Industrial Park,
Irlam Manchester M44 5EG,
United Kingdom

EU Responsible Person:
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Georg-Kollmannsberger-Str. 2,
85386 Eching, Germany

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
www.medela.com

Medela Australia Pty Ltd
3 Arco Lane,
Heatherton Vic, 3202
Australia
www.medela.com.au

Detentor da notificação:
Medela Brasil Produtos Médicos Ltda.
Rua José Martins Fernandes 601 –
Galpão 06, parte 01, Batistini, São
Bernardo do Campo – SP – CEP:
09843-400
CNPJ: 23.371.106/0001-05
Responsável Técnica: Luciana
Janaudis Panerari - CRF/SP: 80805
SAC: sac@medela.com.br

© Medela AG/ref. master doc.
101048585/11-2025/A,
ref. 6.10.8801-51-095/A